
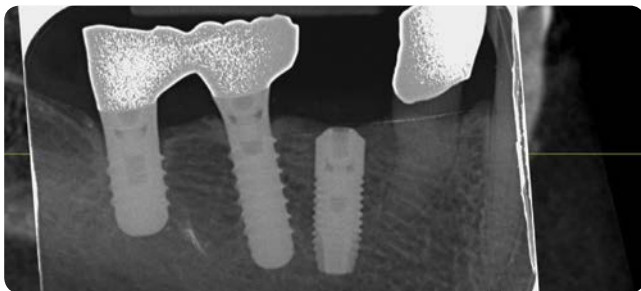


TÄYSIN DIGITAALINEN IMPLANTTIOHJURI CEREC GUIDE 2.0



Kirjoitin marraskuun Hammasväline Extrassa CEREC Guide 2.0 -mahdollisuudesta. Ohjelman tehokkuus mahdollistaa puolen tunnin konsultaatiokäynnillä ottamaan kuvat, suunnittelemaan ja laittamaan ohjuri jyrsitään. Vielä kun tämä kaikki pystytään tekemään alle 60 euron kokonaismateriaalikululla on kyseessä alaa mullistava keksintö.

Ohjuri jyrsitään akryylistä aivan tavallisella CERECin vastaanottojyrsimellä noin 30–40 minuutissa. Kirurgisessa vaiheessa akryylisen ohjurin ja poran välissä käytetään Sironan omia metalliholkkeja, joita on kaikille yleisimmille implanttimerkeille.

Esimerkkisuunnitelma 1 ja lopullinen implantin sijainti

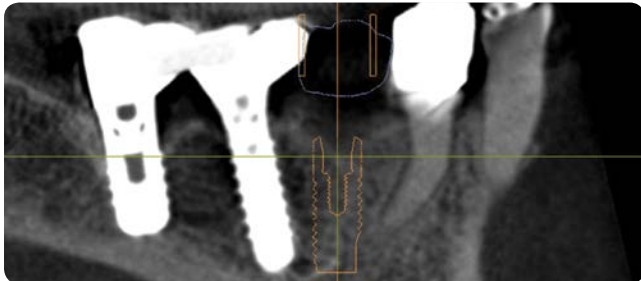


Esimerkkisuunnitelma 2 ja lopullinen implantin sijainti (ja pinta-kiinnitteinen väliaikainen silta)

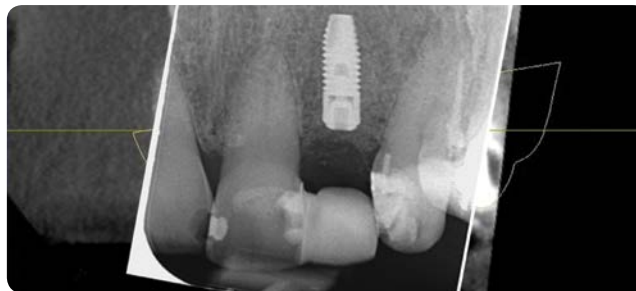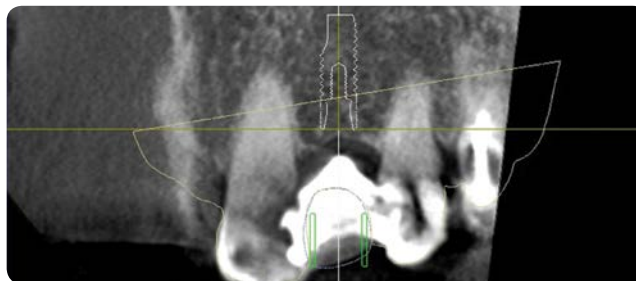

Esimerkki 3 Immediaatti-implantti ja poistokuopan suojaus yksilöllisellä jyrityllä paranemisjatkeella (muotoiltu vanhan juuren mukaisesti). Koko hoito toteutettu yhdellä istunnolla.



teksti ja kuvat:
HLL Marko Ahonen
Cerec Finland |
Oma Hammaslääkärisi

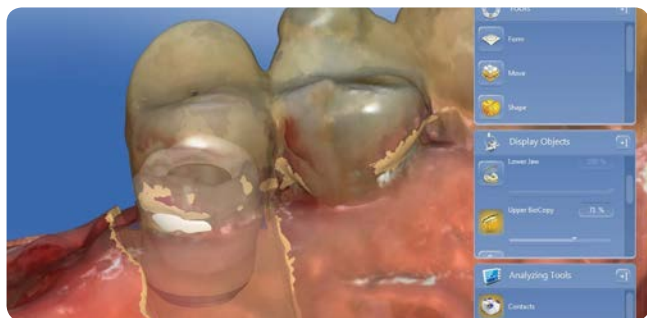

Laajempien implanttitoiden kanssa voidaan koko leuan ohjurit
jyrsiä hammaslaboratoriossa.

Artikkeli on ilmestynyt Hammasväline Extrassa 4-2016